
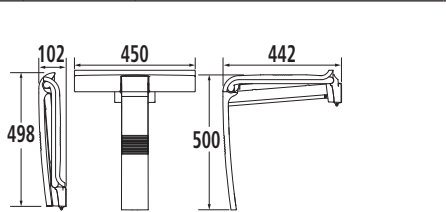







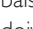

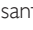





 Poids maximum utilisateur / Max. user weight / Maximengewicht gebruiker / Peso máximo utilizador / Peso max. Utente/Peso máximo do utilizador / Maximales Benutzergewicht / Макс. вес пользователя.  Poids net / Net weight / Nettogewicht / Peso neto / Peso netto / Peso líquido / Nettogewicht / Вес нетто


									
Ce produit est conforme avec la directive 93/42/EEC des dispositifs médicaux. This product is conform with the directive 93/42/EEC for medical products. Dit product beantwoordt aan Richtlijn 93/42/EEC over medische apparatuur. Este producto es conforme con la Directiva 93/42/EEC relativa a los productos médicos. Questo prodotto è in conformità con la Direttiva 93/42/EEC relativa ai dispositivi medicali. Este produto está conforme à Directiva 93/42/EEC relativa aos dispositivos médicos Dieses Erzeugnis entspricht der Richtlinie 93/42/EEC über Medizinprodukte. Соответствует требованиям директивы 93/42 ЕС о медицинских изделиях.									
Référence G / Reference G / Referentie G / Referencia G / Codice G / Referência G / Referenz G / Код G :	<table><tr><td>135700</td><td>135716</td></tr><tr><td>135717</td><td>135719</td></tr><tr><td>135740</td><td>135840</td></tr><tr><td>135841</td><td></td></tr></table>	135700	135716	135717	135719	135740	135840	135841	
135700	135716								
135717	135719								
135740	135840								
135841									
Référence P / Reference P / Referentie P / Referencia P / Codice P / Referência P / Referenz P / Код P :	<table><tr><td>047729</td><td>047730</td></tr><tr><td>047731</td><td>047732</td></tr><tr><td>047733</td><td>047734</td></tr></table>	047729	047730	047731	047732	047733	047734		
047729	047730								
047731	047732								
047733	047734								
Fonction Funcion Funcion Función Funzione Função Funktion Назначение	Permet de prendre une douche en position assise. Allows to take a shower in a seated position. Zo kan u zittend een douche nemen. Permite tomar una ducha en posición sentada. Permette di prendere una doccia in posizione seduta. Permite tomar um duche sentado. Ermöglicht es, im Sitzen zu duschen. Позволяет принимать душ в положении сидя.								
Descriptif Description Beschrijving Descripción Descrizione Descrição Beschreibung Описание	 <table><tr><td></td><td>150 kg</td></tr><tr><td></td><td>2,600 kg</td></tr></table>		150 kg		2,600 kg				
	150 kg								
	2,600 kg								
Numéro notice / Instruction sheet no / Fichenummer / Número instrucciones / Numero manuale / Número do manual / Gebrauchsanweisungsnummer / Номер инструкции	A13570016								
Date de création / Creation's date / Aanmaakdatum / Fecha de creación / Data di creazione / Data de criação / Erstellungsdatum / Дата создания	16/01/2013								
Révision n° / Revision no. / Revisie nr. / Revisión n° / Revisione n° / Revisão n° / Revisionsnr. / № редакции	07								
Date / Date / Datum / Fecha / Data / Data / Datum / Дата	15/12/2017								


 **Ne pas installer cet équipement avant d’avoir lu les instructions ci-dessous :**

 **Instructions de montage.** Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit (position baissée) contre le mur. Le choix des chevilles doit être adapté au support mural. Les 4 points de fixation doivent être impérativement respectés.  **Entretien et nettoyage.** IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'usage des solutions de savon doux. **ATTENTION : NE PAS UTILISER** de produits de nettoyage à base de cétones, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuer un rinçage à l'eau claire.  **Avertissements liés à la sécurité.** Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège. Lorsque le siège est en position relevée, **NE PAS L'UTILISER** comme barre d'appui. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.  En fin de vie, le produit doit être confié par l'utilisateur à la filière de récupération homologuée à cet effet dans le pays d'utilisation.


GB  **Do not install this equipment before reading the following instructions:**




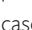
 **Fitting instructions.** Before drilling into the wall, physically hold the product (in the lowered position) against the wall so that the stand is PERPENDICULAR to the floor. Plugs have to be selected according to the type of wall. The 4 fixings points have to be necessarily respected.  **Care and maintenance.** **IMPORTANT:** In order to guarantee the lasting quality of this product and its safety for the user, we recommend that when cleaning it you should use mild soap solutions. **CAUTION: DO NOT USE** cleaning products made of: etones, hydrocarbons, acids, bases, esters and ethers. After use of a cleaning product, make a rinsing in the clear water.  **Safety warnings.** The shower seat adds security to the user if it is fitted according to instructions. After fitting and before using, make sure that the fixing screws are tightened securely. The shower seat is designed to be used in seated position. To guarantee the user's safety, it is not advised to rise up on the seat. When the seat is in a raised position, **DO NOT USE** it as a grab bar. To avoid any pinching risks, do not

put fingers in the mobile parts. The product does not contain any hazardous substances. The manufacturer shall have no liability for any injury caused by improper installation or use of this shower seat.  At the end of its life cycle, the user must have the product recycled by a certified facility in the country of use.





NL  **Installeer deze uitrusting pas nadat u de onderstaande instructies gelezen hebt :**

 **Tips voor.** Alvorens te boren, hou het product tegen de muur (lage stand) zodat de steunpoot LOODRECHT ten opzichte van de grond staat. De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De 4 bevestigingspunten moeten op deze plaats worden aangebracht.  **Onderhoud en reiniging.** **OPGELET: GEBRUIK NOOIT** reinigingsmiddelen op basis van: ketonen, koolwaterstoffen, zuren, basen, esters en ethers. Na gebruik van een reinigingsproduct moet u met helder water spoelen.  **Veiligheidswaar-schuwingen.** De douchestoel biedt de gebruiker meer veiligheid indien hij volgens de instructies geïnstalleerd wordt. Na de montage en vooraleer u de stoel gebruikt, moet u er zich van vergewissen dat de bevestigingsschroeven goed zijn vastgeschroefd. De douchestoel is ontworpen om in zitstand gebruikt te worden. Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen wordt het formeel afgeraden om op de stoel te staan. Wanneer de stoel opgeklapt is, mag u deze niet als steungreep gebruiken. Om elk gevaar op vastklemming te vermijden mag u uw vingers niet tussen de beweegbare delen steken. Het product bevat geen stoffen die de gezondheid kunnen schaden. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af indien u gewond raakt door een verkeerde installatie of een verkeerd gebruik van deze douchestoel.  Op het einde van zijn levensduur, moet het product door de gebruiker aan een daartoe goedgekeurde recyclage-instelling worden toevertrouwd in het land waar het gebruikt wordt.



ES  **No montar antes haber leído los consejos de montaje:**



 **Consejos para el montaje.** Antes de perforar el tabique, colocar físicamente el producto (posición baja) contra la pared de modo que el soporte esté PERPENDICULAR al suelo. La selección de los tacos tiene que ser adaptada al soporte mural. Los 4 puntos de fijación tienen que ser obligatoriamente respetados.  **Mantenimiento y limpieza.** **IMPORTANTE:** Para garantizar la perennidad de este producto y la seguridad del usuario, recomendamos para su limpieza usar soluciones de jabón suave. **ATENCIÓN: NO UTILIZAR** productos de limpieza a base de: cetonas, hidrocarburos, ácidos, bases, ésteres y éteres. Después de utilización de un producto de limpieza, efectuar un enjuague al agua clara.  **Advertencias relativas a la seguridad.** El asiento de ducha añade seguridad al utilizador si es montado conforme a las instrucciones. Después el montaje y antes de la utilización, asegurarse que los tornillos de fijación son bien apretados. Este asiento es concebido para un uso en posición sentada. Para garantizar la seguridad del utilizador, no es recomendado subir de pie sobre el asiento. Cuando el asiento es en posición levantada, **NO UTILIZARLO** como una barra de apoyo. Para evitar todo riesgo de pellizco, no poner los dedos en las partes móviles. El producto no contiene ninguna sustancia peligrosa para la salud. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de herida provocada por la mala instalación o utilización de este asiento.  Al final del ciclo de vida del producto, el usuario debe confiario a la red de recuperación homologada para este fin en el país de utilización.


IT  **Non installare questo prodotto senza aver letto le istruzioni sotto elencate :**

 **Istruzioni di montaggio.** Prima di forare la parete, presentare fisicamente il prodotto (posizione abbassata) contro la parete in modo che il piede sia PERPENDICOLARE al pavimento. La scelta dei tasselli deve essere adatta al supporto murale. I 4 punti di fissaggio devono essere assolutamente rispettati.  **Manutenzione e pulizia.** **IMPORTANTE:** Per garantire la sua perennità e la sicurezza dell'utente, raccomandiamo di pulirlo con soluzioni di sapone delicato. **ATTENZIONE : NON UTILIZZARE** prodotti detergenti a base di : chetoni, idrocarburi, acidi, basi, esteri e eteri. Dopo utilizzazione di un prodotto di pulizia, effettuare una risciacquatura all'acqua naturale.  **Avvertenze legate alla sicurezza.** Il sedile da doccia aggiunge sicurezza all'utente se è montato in conformità con le istruzioni. Dopo il montaggio e prima dell'utilizzazione, assicurarsi che le viti di fissaggio sono ben strette. Il sedile è concepito per un uso in posizione seduta. Per garantire la sicurezza dell'utente, è sconsigliato salire sopra il sedile in piedi. Quando il sedile è rialzato, **NON UTILIZZARLO** come un maniglione. Per evitare rischi di pinzamento, non mettere le dita nelle parti mobili. Il prodotto non contiene sostanze pericolose per la salute. Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di ferita provocata da una cattiva installazione o utilizzazione di questo sedile.  Il prodotto deve essere smaltito dall'utilizzatore in accordo con quanto previsto dalle leggi vigenti nel paese di utilizzo.

PT  **Não instalar este equipamento antes de ler as instruções abaixo:**





 **Conselhos de instalação.** Antes de perfurar o tabique, apresentar fisicamente o produto (posição aberta) contra a parede de modo que o pé seja PERPENDICULAR ao solo. Os esforços suportados pela fixação à parede exigem uma selecção cuidadosa dos parafusos e das buchas em função do tipo de parede. Os 4 pontos de fixação devem ser imperativamente respeitados.  **Manutenção e cuidados.** **IMPORTANTE:** Para garantir a perenidade deste artigo e a segurança do utilizador, recomendamos para a limpeza, a utilização de soluções de sabão suave. **CUIDADO: NÃO UTILIZAR** produtos de limpeza à base de:

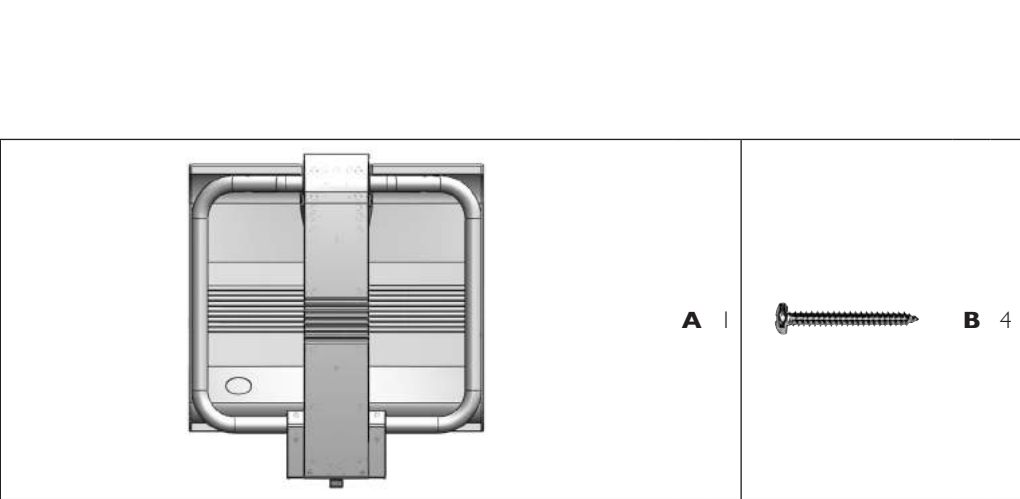
acetonas, hidrocarbonetos, ácidos, bases, ésteres e éteres. Após utilização de um produto de limpeza, efectuar uma enxaguadela com água limpa.  **Advertências ligadas à segurança.** O assento de duche confere uma segurança suplementar ao utilizador se for instalado em conformidade com as instruções. Após montagem e antes de utilização, assegurarse de que os parafusos de fixação foram bem apertados. O assento de duche foi concebido para uma utilização em posição sentada. Para garantir a segurança do utilizador, é formalmente desaconselhado ficar em pé em cima do assento. Quando o assento estiver em posição erguida, não se servir dele como barra de apoio. A fim de evitar todos os riscos de entalamento, não colocar os dedos nas partes móveis. O produto não contém qualquer substância perigosa para a saúde. O fabricante declina toda responsabilidade em caso de ferimentos provocados por uma instalação ou utilização incorrectas deste assento de duche.  Em fim de vida, o produto deve ser entregue pelo utilizador à fileira de recuperação homologada para esse efeito no país de utilização.

DE  **Bitte installieren Sie die Ausrüstung erst, nachdem Sie die untenstehenden Anweisungen gelesen haben:**

 **Montageanweisungen.** Bevor Sie in die Wand bohren, halten Sie das Produkt (in heruntergeklappter Position) so gegen die Wand, dass die Stütze sich senkrecht zum Boden befindet. Die Dübel müssen der Wandsubstanz entsprechend ausgewählt werden. Die 4 Befestigungspunkte müssen unbedingt berücksichtigt werden.  **Wartung und Reinigung.** **WICHTIG:** Um die Lebensdauer dieses Produktes und die Benutzersicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir eine Reinigung mit milden Seifenlösungen. **ACHTUNG: BITTE KEINE** keton-, kohlenwasserstoff-, säure-, base-, ester-, oder ätherhaltigen Reinigungsmittel benutzen. Nach Benutzung eines Reinigungsmittels bitte mit klarem Wasser nachspülen.  **Zu Ihrer Sicherheit.** Wenn der Duschsitz den Anweisungen entsprechend angebracht worden sind, erhöht er die Sicherheit des Benutzers. Überprüfen Sie nach der Montage und vor der Benutzung den festen Sitz der Befestigungsschrauben. Der Duschsitz ist für die Benutzung im Sitzen konzipiert. Um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten, ist es ausdrücklich verboten, sich auf den Sitz zu stellen. Den Sitz in hochgeklappter Position **NICHT** als Haltestange **BENUTZEN.** Vermeiden Sie es, die Finger zwischen die beweglichen Teile zu bringen - es besteht Einklemmgefahr! Das Produkt enthält keine gesundheitsschädlichen Substanzen. Der Hersteller lehnt im Falle von Verletzungen, die durch fehlerhafte Installierung oder Benutzung hervorgerufen werden, jegliche Verantwortung ab.  Der Benutzer hat das Produkt nach Ende seines Lebenszyklus in einer für diesen Zweck zugelassenen Recyclinganlage des Benutzungslandes zu entsorgen.

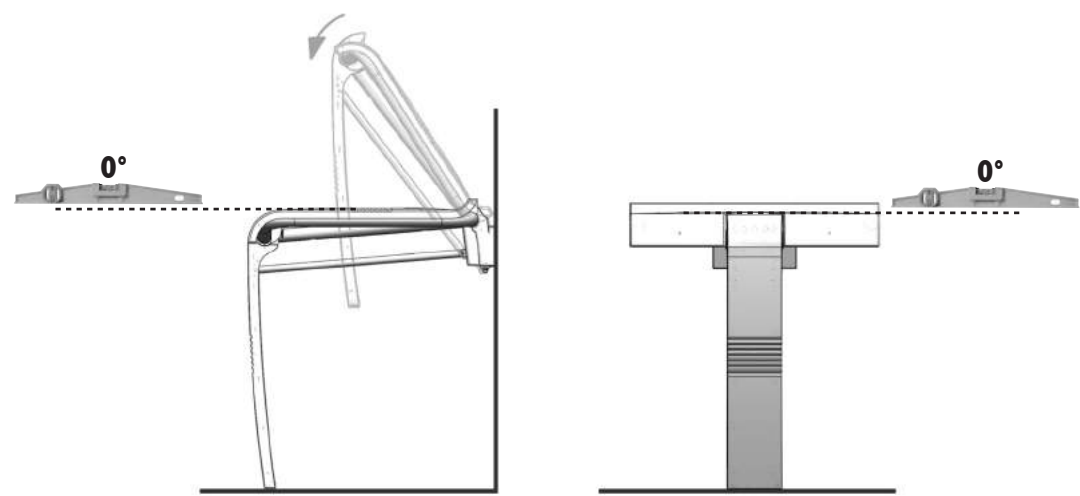
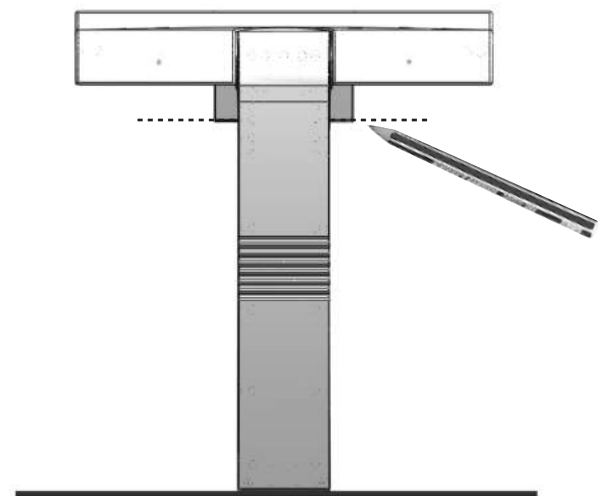
RU  **Перед установкой данного изделия прочтите следующие инструкции:**

 **Инструкции по подключению.** Перед сверлением отверстий в стене разместите изделие (в опущенном положении) на стене таким образом, чтобы оно располагалось ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО к полу. Дюбели должны выбираться, исходя из типа стены. Должны быть использованы 4 точки крепления.  **Уход и обслуживание.** **ВНИМАНИЕ:** Чтобы обеспечить длительное качество данного изделия и его безопасность для пользователя, мы рекомендуем использовать при его чистке мягкие мыльные растворы. **ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** чистящие средства, сделанные с применением: кетонов, углеводов, кислот, щелочей, простых и сложных эфиров. После применения чистящего средства промойте изделие чистой водой.  **Меры безопасности.** Душевое сидение обеспечивает дополнительную безопасность пользователя, если оно установлено в соответствии с инструкциями. После установки и перед началом использования проверьте, чтобы крепежные винты были надежно затянуты. Душевое сидение предназначено для использования в сидячем положении. Чтобы гарантировать безопасность пользователя, не рекомендуется вставать на сидение. Если сидение находится в поднятом положении, **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** его в качестве поручня. Чтобы не прищемить пальцы, избегайте их попадания в подвижные части. Изделие не содержит опасных веществ. Изготовитель не несет ответственности за любые увечья, вызванные неправильной установкой или использованием душевого сиденья.  По истечении срока эксплуатации изделия оно должно быть утилизировано специализированными службами в соответствии с требованиями страны, в которой изделие эксплуатировалось.

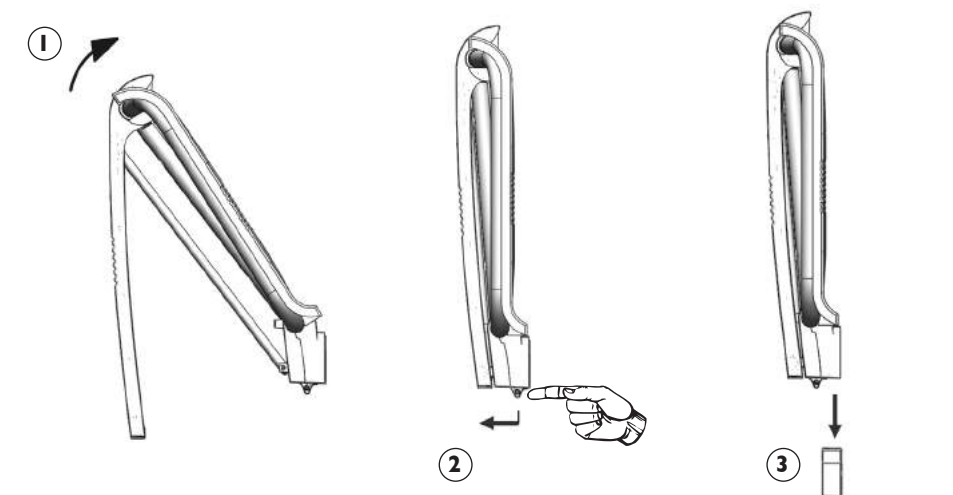
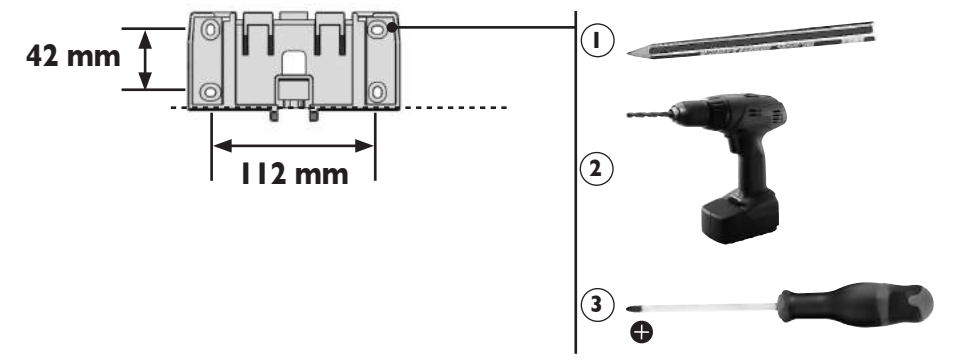
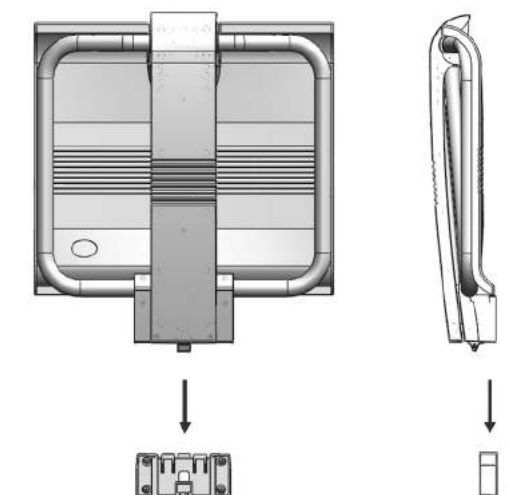


1

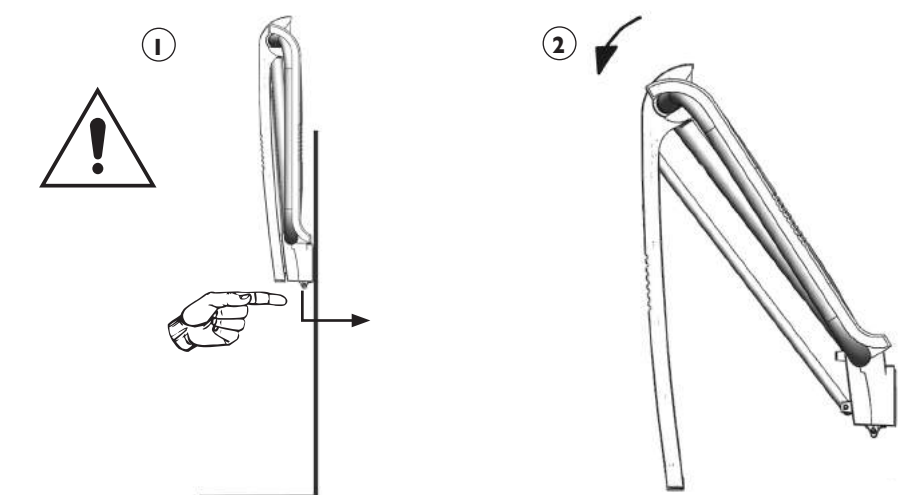
Positionner le siège
Position the seat
 Plaats de stoel
Coloque el asiento
 Posizionare il sedile
Posicione o assento
 Positionieren Sie den Sitz
Установите сиденье

**2****3**

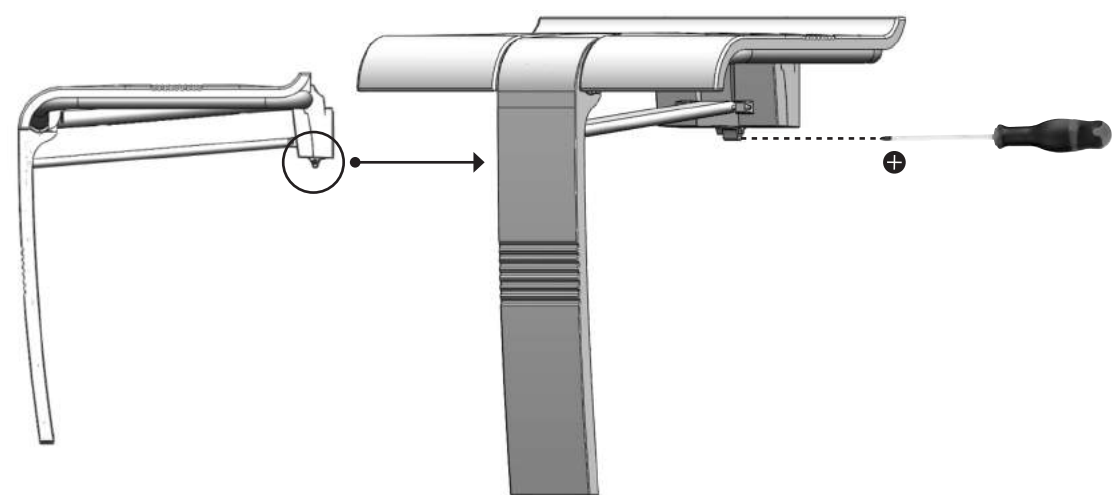
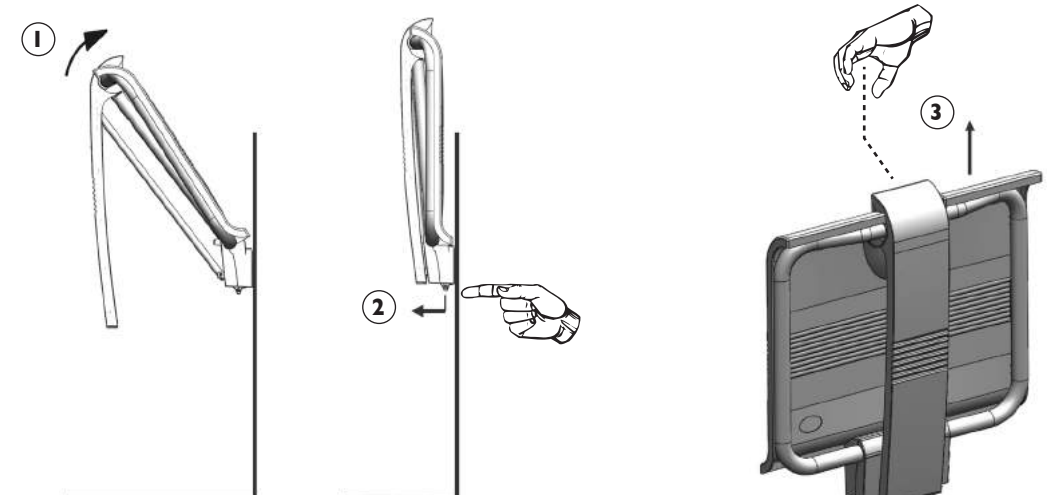
Oter la platine murale du siège
Remove the wall mount from the seat
 Het muurafsluitplaatje van de stoel wegnemen
Retirar la platina mural del asiento
 Rimuovere la piastrina murale del sedile
Remove a platina mural do banco
 Die Wandplatte des Duschsitzes abnehmen
Убрать настенное крепление с сиденья

**4****5****6**

AVANT UTILISATION : Pousser la clavette pour le verrouiller; abaisser le siège.
BEFORE USE: Push the locking pin to lock it, lower the seat.
 VOOR GEBRUIK: Duwen de spie om de stoel blokkeren, de stoel naar beneden brengen.
ANTES DE UTILIZACIÓN: Empujar la chaveta para bloquearlo, bajar el asiento.
 PRIMA DELL'USO : Spingere la chiavetta per bloccarlo, abbassare il sedile.
ANTES DE USO: Empurre a chavinha para o bloqueio, baixe o banco.
 VOR GEBRAUCH: Den Keil drücken, um den Sitz in der Position zu blockieren, den Sitz herunterklappen.
Перед использованием: Нажать рычаг защелки для постоянной фиксации; Опустить сиденье.

**7**

Visser afin de rendre le système indémontable sans outils
Screw in so the system cannot be dismantled without tools
 Vastschroeven om het systeem niet demonteerbaar te maken zonder gereedschap
Atornillar para que el sistema no pueda desmontarse sin herramientas
 Avvitare per rendere il sistema smontabile senza attrezzi
Aperte por forma a tornar o sistema indesmontável sem ferramenta
 Festschrauben, damit das System ohne Werkzeug nicht abmontiert werden kann
Завинтить, чтобы исключить демонтаж устройства без использования инструментов.

**8**

Fabricant & Distributeur : GODONNIER SAS

ZI du Bayon - 4 Rue Jean Moulin - 42150 La Ricamarie - France
 Tél. +33 (0)4.77.81.43.81 - Fax +33 (0)4.77.80.41.84 - Web Site : www.godonnier.fr - e-mail : info@godonnier.fr

Distributeur : PELLET ASC

ZI de Chapotin - 240 rue des Frères Voisin - CS 270048 - 69967 Chaponnay Cedex - France
 Tél. +33 (0)4.78.96.82.20 - Fax +33 (0)4.78.96.70.52 - Web Site : www.pellet-asc.fr - e-mail : info@pellet-asc.fr